



Portfólio



Na Ziacom® trabalhamos há mais de 20 anos para a saúde oral e para o bem-estar dos pacientes em todo o Mundo através da concepção e fabrico de soluções inovadoras em implantes dentários, componentes protéticos, instrumentos cirúrgicos e biomateriais de máxima qualidade.



Together for **health**

O compromisso com a qualidade e a inovação fazem parte dos valores e da essência da **Ziacom**. Aplicamos tecnologia avançada em todas as fases do ciclo de produção, desde a sua concepção e fabrico até aos processos de verificação, limpeza e embalagem.

A Ziacom Implants SLU é licenciada como fabricante de dispositivos médicos e tem a autorização de comercialização da AEMP 6425-PS (Agência Espanhola do Medicamento e Produtos Sanitários) e o nosso sistema de gestão de qualidade é certificado de acordo com os requisitos das normas UNE-EN-ISO 9001:2015 e UNE-EN-ISO 13485:2018.

Para oferecer a máxima qualidade e compromisso, todos os nossos implantes têm garantia vitalícia.



Titânio Zitium®

Os implantes da **Ziacom®** são fabricados em titânio grau 4 **Zitium®** e grau 5 ELI (Extra Low Interstitial), o que lhes confere uma melhoria substancial no seu limite elástico e propriedades mecânicas.

Graças ao titânio **Zitium®** os nossos implantes mantêm a conformidade com os requisitos das normas ASTM F67 e ISO 5832-3. Os implantes Ziacom® são esterilizados por radiação com Raios Beta a 25 kGy, exceto os implantes ortodônticos DSQ que são comercializados **não estéreis**.



FDA Approved*

*Consulte os modelos aprovados

IMPORTANTE

Todos os nossos produtos cumprem os requisitos do Regulamento 745/2017, o que nos permitiu obter a marcação CE com o organismo notificado 0051.



Inovação e formação contínua

A nossa equipa de I+D+i trabalha diariamente num processo de investigação e inovação para a melhoria contínua dos nossos sistemas e produtos de vanguarda com o objetivo de oferecer as melhores soluções para o bem-estar de todos os pacientes.

Apostamos na investigação e na formação contínua como forma de prestar apoio científico ao setor da medicina dentária e apoiar os jovens profissionais. Por esta razão, colaboramos com centros de formação, universidades e sociedades científicas criando um ambiente didático prático e especializado para potenciar os seus conhecimentos, as suas competências e o seu crescimento pessoal. Além disso, nas nossas instalações dispomos de espaços específicos para a formação, "hands-on" e equipamento de formação avançado.



Ziacom® no Mundo

A nossa vocação é levar a saúde oral aos pacientes de todo o Mundo. Contamos com um sólido **plano de crescimento e expansão internacional** para incrementar a presença da Ziacom internacionalmente nas **áreas já consolidadas**, bem como, avançar em outras áreas de **crescimento**.

Para isso, oferecemos aos nossos **parceiros internacionais** uma relação de **confiança e colaboração**, adaptando-nos às suas **necessidades locais** com soluções adaptadas a cada mercado.

Somos rigorosos no cumprimento dos requisitos específicos de **qualidade, regulamentares e legais de cada país**, tanto para os processos de registo como de distribuição dos nossos produtos, contamos com as **certificações específicas** de cada um dos territórios onde atuamos.





Sede central

Ziacom Implants

Madrid - ESPANHA
Calle Búhos, 2 - 28320 Pinto
☎ +34 91 723 33 06

Filiais

Ziacom Lusobionic

Regus Miraflores, Torre de Monsanto,
Rua Afonso Praça n.º 30 - 7º
1495-061 Algés - Lisboa - PORTUGAL
☎ +351 215 850 209

Ziacom Medical USA LLC

Miami - EUA
333 S.E. 2nd Avenue, Suite 2000
Miami, FL 33131 - EUA
☎ +1(786) 224 - 0089

Ziacom ITS


Viale del Lavoro, 14
35010 Vigonza
Padova - ITÁLIA
☎ +39 049 603310

Ziacom Safe implant

Av. Iñaquito, Edifício Metropolitan,
Oficina 304
170507, Quito - EQUADOR
☎ +593 96 368 0879

Pode consultar a lista atualizada de distribuidores ZiacomGroup em www.ziacomgroup.com no separador expansão internacional e pode entrar em contacto com o nosso departamento de Exportação no seguinte endereço de e-mail: export@ziacom.com

Implantes dentários

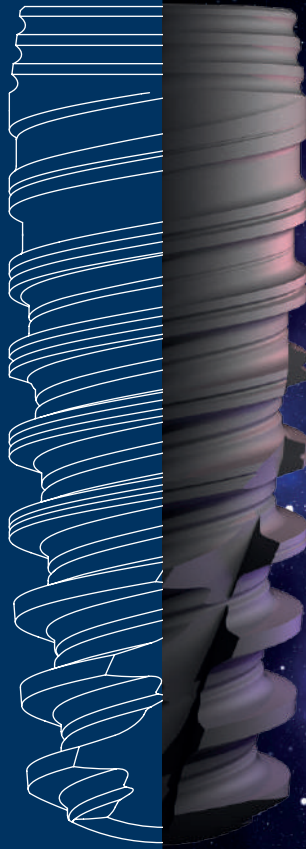

GALAXY

Implante de conexão cônica

GALAXY

IMPORTANTE

Para mais informações e recomendações de uso deste implante consultar o catálogo específico.



Dupla espira



Conexão cônica de 11° com duplo hexágono interno.



Ápice ativo



NOTA

A embalagem pode variar consoante o tratamento de superfície.

Plataforma disponível

RP

Tratamento de superfície

Titansure
Titansure
Advance



Fabricado em
Titânio grau 4

ZiTium®

CONEXÃO

- Plataforma única para todos os diâmetros.
- Platform Switch.

ZONA CORTICAL

- Micro-anéis.
- Macro-desenho cortical de cone invertido.


CORPO CÔNICO

- Dupla espira.
- Geometria variável:
 - » Coronal - espira trapezoidal grossa.
 - » Meio - espira trapezoidal mais fina.
 - » Apical - espira em V.

ÁPICE

- Aberturas apicais oblíquas.
- Ápice ativo auto-roscante.
- Ápice arredondado atraumático.

Implantes dentários

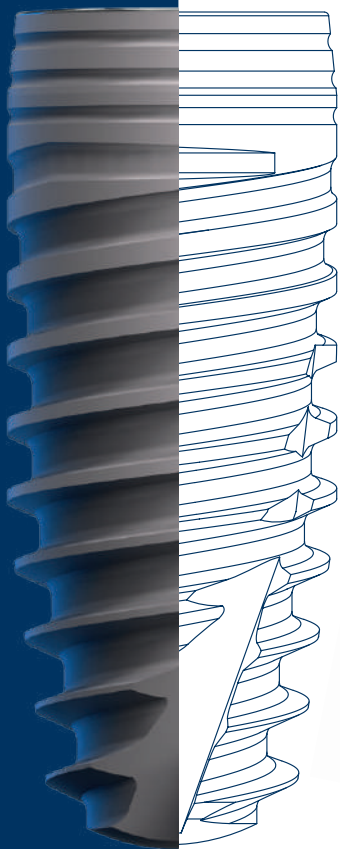

ZM10

Implante de conexão cônica

ZM10

IMPORTANTE

Para mais informações e recomendações de uso deste implante consultar o catálogo específico.



Dupla espira



Conexão cônica de 11° com duplo hexágono interno.



Ápice ativo



NOTA

A embalagem pode variar consoante o tratamento de superfície.

Plataforma disponível

RP

Tratamento de superfície

Titansure
Titansure
Advance



Fabricado em
Titânio grau 4

ZiTium®

CONEXÃO

- Plataforma única para todos os diâmetros.
- Platform Switch.

ZONA CORTICAL

- Micro-anéis.
- Macro-desenho cortical de cone invertido.


CORPO CÔNICO

- Dupla espira.
- Geometria variável:
 - » Coronal - espira trapezoidal grossa.
 - » Meio - espira trapezoidal mais fina.
 - » Apical - espira em V.

ÁPICE

- Aberturas apicais oblíquas.
- Ápice ativo auto-roscante.
- Ápice arredondado atraumático.

Implantes dentários

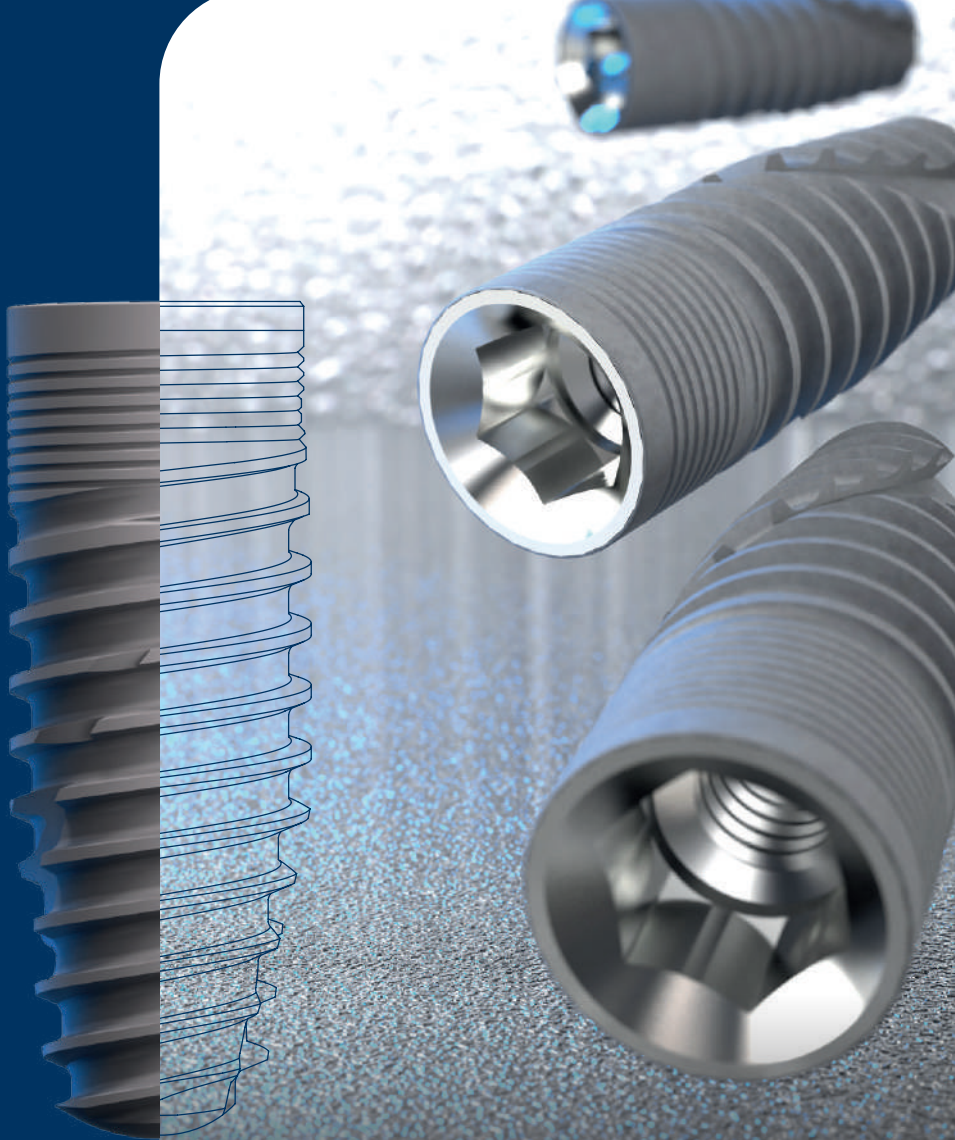


ZiNiC[®]MTX


Implante de conexão hexagonal interna

Zinicom[®]MTX

IMPORTANTE Para mais informações e recomendações de uso deste implante consultar o catálogo específico.

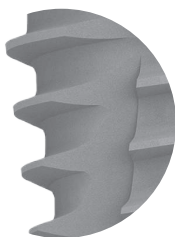

Dupla espira

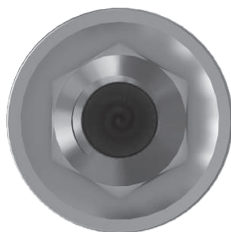

Conexão
hexágono interno



Ápice ativo



Plataforma disponível

NP  RP  WP 

Tratamento de superfície

Titanasure



Fabricado em
Titânio Grau 5 ELI
(Extra Low Interstitials)

Titânio
Grado 5
ELI

NOTA

A embalagem pode variar consoante o tratamento de superfície.

ZONA CORTICAL

- Desenho micro-rosca.
- Extensão micro-rosca.
- Macro-desenho cilíndrico.

ÁPICE

- Ápice ativo auto-roscante.
- Ápice atraumático.



CORPO

- Espiras ativas de ângulo reduzido.
- Aberturas apicais transversais.
- Morfologia cônica otimizada.

DESENHO CÔNICO

- Facilita a formação óssea em baixa densidade.
- Indicado para carga imediata.
- Para casos de convergência e/ou colapso apical.

Implantes dentários

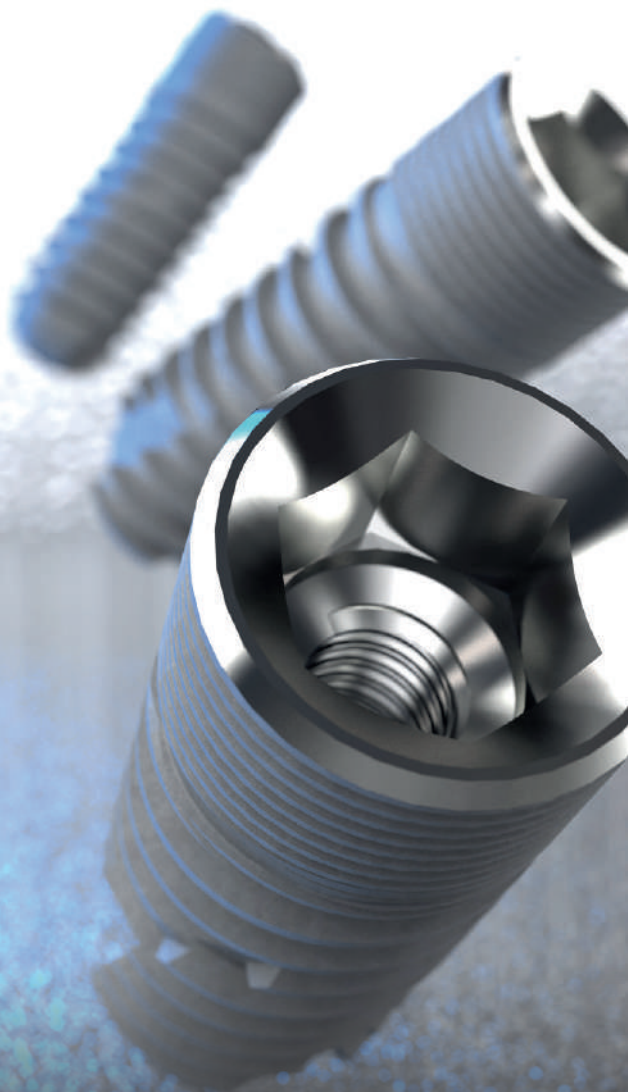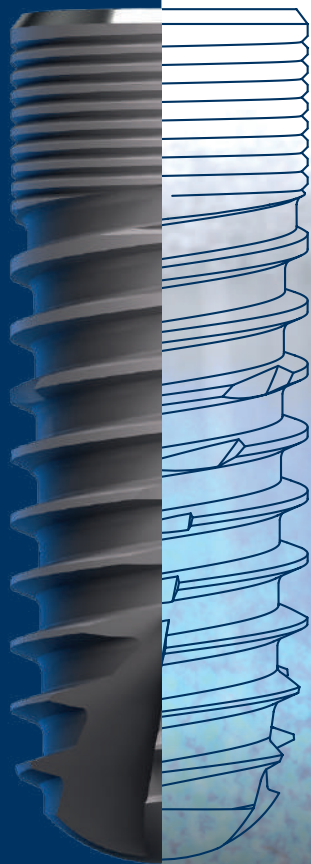

ZiNic[®]sx

Implante de conexão hexagonal interna

Zinix[®]sx


IMPORTANTE Para mais informações e recomendações de uso deste implante consultar o catálogo específico.



Dupla espira



Conexão
hexágono interno

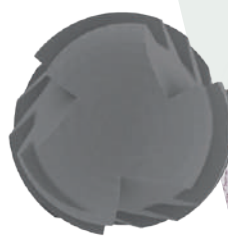

Ápice ativo



Plataforma disponível

NP  RP  WP 

Tratamento de superfície

Titanasure



Fabricado em
Titânio Grau 5 ELI
(Extra Low Interstitials)

Titânio
Grado 5
ELI

NOTA

A embalagem pode variar consoante o tratamento de superfície.

ZONA CORTICAL

- Desenho micro-rosca.
- Extensão micro-rosca.
- Macro-desenho cilíndrico.

ÁPICE

- Ápice ativo auto-roscante.
- Ápice atraumático.

CORPO


- Espiras ativas de ângulo reduzido.
- Ápice ativo auto-roscante.
- Aberturas apicais transversais.
- Morfologia cilíndrica otimizada.
- Ápice atraumático.

DESENHO CILÍNDRICO

(Paredes paralelas)

- Menor tempo para a osteointegração.
- Estabilidade primária muito segura.
- Indicado para tratamentos planeados em 2 etapas.

Implantes dentários

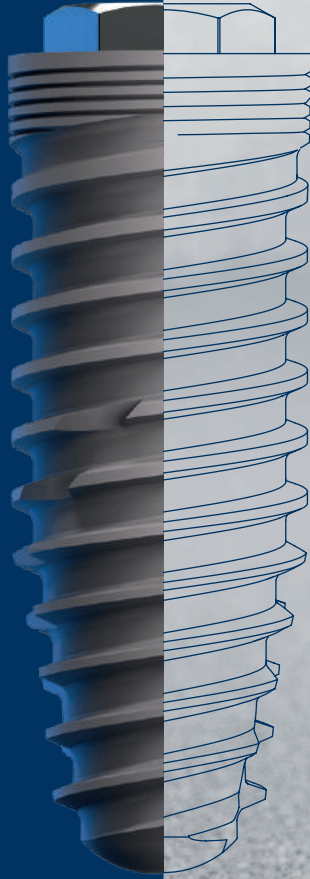

ZM1



Implante de conexão hexagonal externa

ZM1

IMPORTANTE

Para mais informações e recomendações de uso deste implante consultar o catálogo específico.



Dupla espira



Conexão de hexágono externo



Ápice ativo



Plataforma disponível

NP  RP  WP 

Tratamento de superfície

Titanasure

NOTA

A embalagem pode variar consoante o tratamento de superfície.



Fabricado em
Titânio grau 4

ZiTium®

CONEXÃO

- Conexão hexagonal externa.

ZONA CORTICAL

- Desenho micro-rosca.
- Extensão micro-rosca.
- Macro-desenho híbrido.


CORPO

- Espiras ativas de ângulo reduzido.
- Ápice ativo auto-roscante.
- Aberturas apicais transversais.
- Morfologia cônica otimizada.
- Ápice atraumático.

DESENHO CÔNICO

- Facilita a formação óssea em baixa densidade.
- Indicado para carga imediata.
- Para casos de convergência e/ou colapso apical.

Implantes dentários

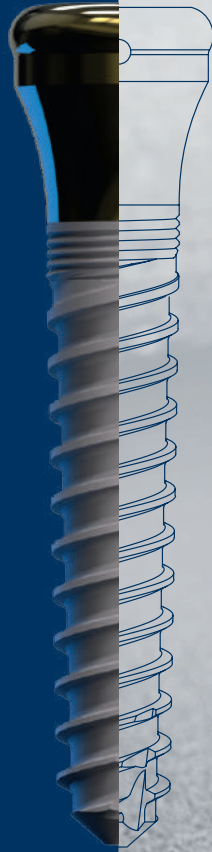

ZMK

Implante monobloco Kirator

ZMK

IMPORTANTE

Para mais informações e recomendações de uso deste implante consultar o catálogo específico.



Dupla espira



Conexão Kirator
(Tipo locator)



Ápice ativo



Plataforma disponível

Kirator (Tipo locator)

Tratamento de superfície

Titanasure



Fabricado em
Titânio grau 4

ZiTium®

NOTA

A embalagem pode variar consoante o tratamento de superfície.


CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA

- Protocolo de fresagem reduzido.
- Uma única fase cirúrgica, transmucosa.
- Pós-operatório normalmente assintomático.
- Sem segunda cirurgia.
- Diâmetro reduzido que permite a implantação em maxilares com dimensões limitadas.

SIMPLICIDADE PROTÉTICA

- Zona coronal com morfologia Kirator (Tipo locator) para sobredentaduras (não inclui pack de processamento).
- Sem parafusos de componentes protéticos.

Implantes dentários

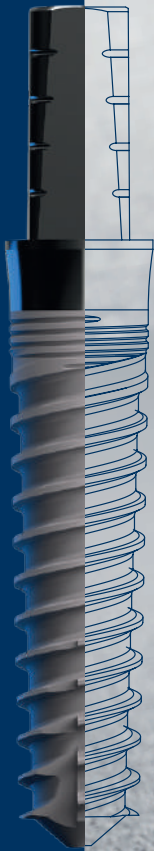

ZMR

Implante monobloco

ZMR · ZMRs

IMPORTANTE

Para mais informações e recomendações de uso deste implante consultar o catálogo específico.



Dupla espira



Conexão protética
de pilar reto



Ápice ativo



Plataforma disponível

Pilar reto

Tratamento de superfície

Titan^{sure}



Fabricado em
Titânio grau 4

ZiTium®

NOTA

A embalagem pode variar consoante
o tratamento de superfície.


CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA

- Protocolo de fresagem reduzido.
- Uma única fase cirúrgica, transmucosa.
- Pós-operatório normalmente assintomático.
- Sem segunda cirurgia.
- Diâmetro reduzido que permite a implantação em segmentos edêntulos M-D limitados.

SIMPLICIDADE PROTÉTICA

- Pilar reto talhável de função imediata que facilita a toma de impressão.
- Sem parafusos de componentes protéticos.

Implantes dentários

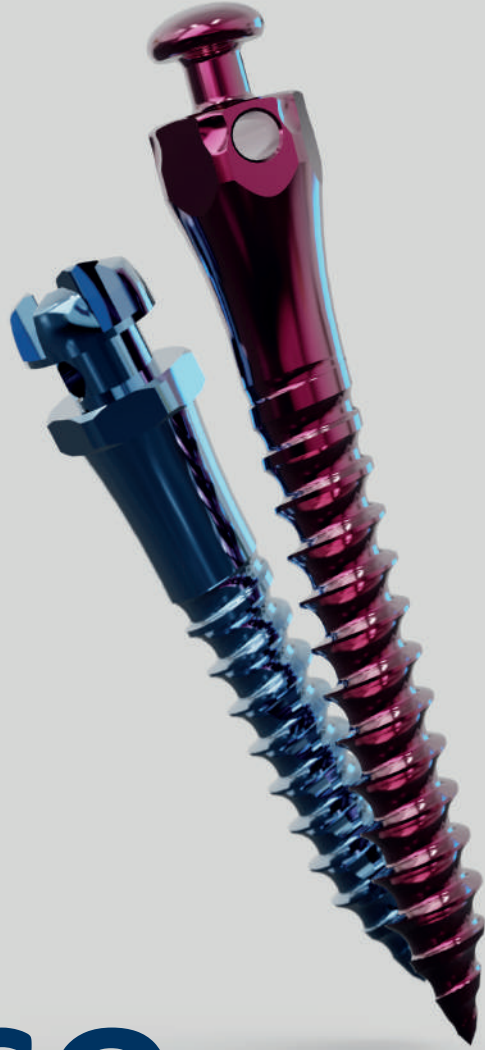


DSQ

Fabricado em
Titânio Grau 5 ELI
(Extra Low Interstitials)

Titânio
Grado 5
ELI



Corpo cônico com
espira auto-roscante.

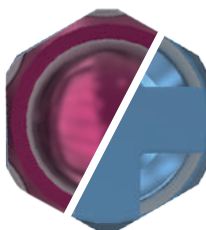

Base hexagonal
de 2,50 mm



Ponta
autoperfurante



IMPORTANTE

Para mais informações e recomendações de uso deste implante consultar o catálogo específico.


DSQ^{CR}

ZONA RETENTIVA

- Cabeça redonda que evita a laceração dos tecidos.
- Slot para retenção de acessórios ortodônticos.
- Orifício de retenção de 0,70 mm para o uso de fios e ligaduras.
- Perfil transmucoso de 1,00 mm ou 2,50 mm.

USO INTRA-ALVEOLAR

■ ÁREA MAIS FREQUENTE

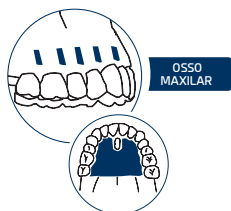

DSQST

ZONA RETENTIVA


- Cabeça tipo botão que evita a laceração dos tecidos.
- Zona retentiva para utilização de acessórios ortodônticos.
- Orifício de retenção de 0,70 mm para o uso de fios e ligaduras.
- Perfil transmucoso de 3,00 mm.

USO EXTRA-ALVEOLAR

■ ÁREA MAIS FREQUENTE



Implantes dentários

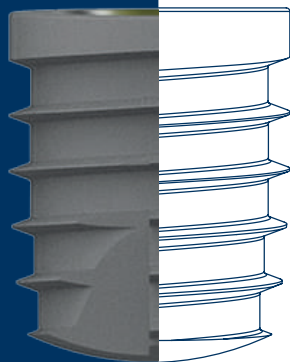

Di²igital[®]
Arch

Sistema de impressão digital
by Dr. Luis Cuadrado de Vicente

Concebido fundamentalmente para procedimentos de carga imediata com um scanner intraoral, com a finalidade de copiar ou recriar a situação anterior ou de início do paciente. Este sistema permite a sobreposição de todos os ficheiros que contenham o Scanbody i² na mesma posição espacial e obter um fluxo de trabalho novo, quer a nível clínico, quer no processo de desenho CAD-CAM. Mais rápido, fácil e preciso, tanto a nível funcional como estético.


IMPORTANTE

Para mais informações e recomendações de uso deste implante consultar o catálogo específico.


Sistema Diⁱgital[°] 1.0 Arch



Sistema Diⁱgital[°] 2.0 Arch

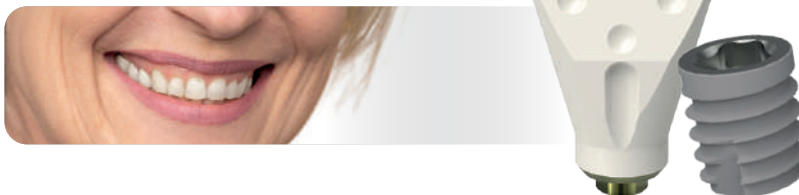

Componentes protéticos

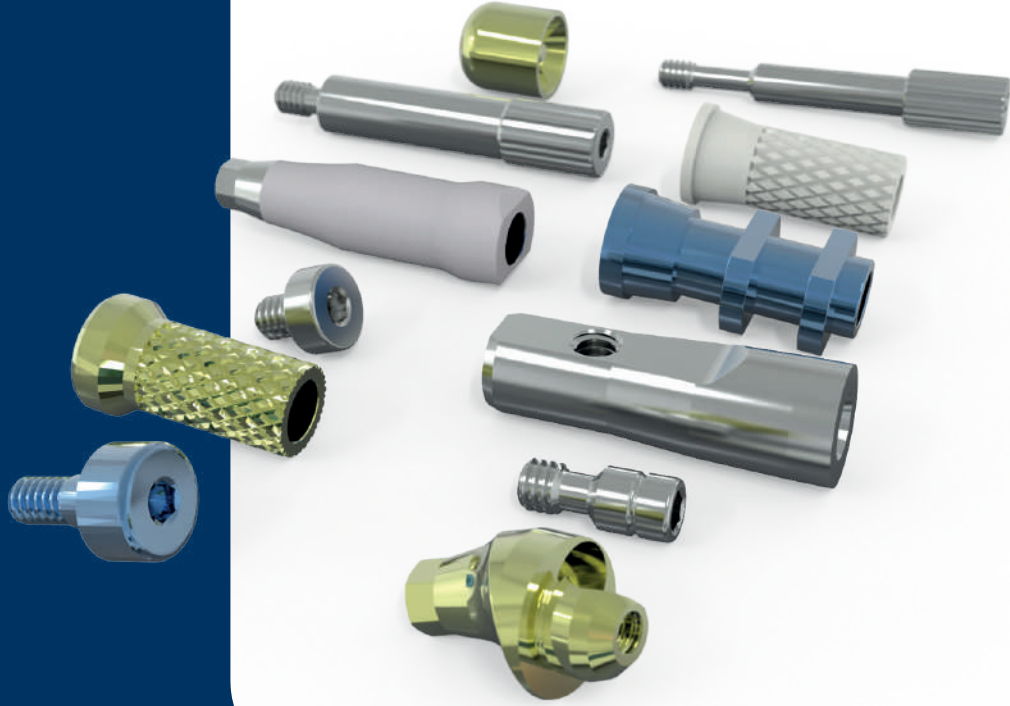

Componentes analógicos e digitais para toda a família de implantes Ziacom.

Para todas as soluções protéticas sobre implantes Ziacom, concebemos cada detalhe da nossa vasta gama de componentes protéticos para proporcionar aos profissionais de medicina dentária a possibilidade de resolver cada caso de forma individual, duradoura e estética. Todos os nossos componentes têm 15 anos de garantia.



Disponos de:

Componentes diretos ao implante e para os nossos transepiteliais Nature, Basic e XDrive (também conhecido como Multi-Unit).

Soluções provisórias, de transição e definitivas, tanto aparafusadas como cimentadas, analógicas e CAD CAM.

Bibliotecas digitais para todos os nossos componentes.

A Ziacom tem como objetivo estar na vanguarda da inovação, por isso apresentamos o pilar **Nature**. Concebido para moldar o perfil de emergência gengival ao diâmetro pretendido, independentemente do diâmetro do implante colocado. O pilar Nature é anodizado em 2 secções, para a zona gengival em amarelo e para a zona roscada em cores diferentes, que indicam o diâmetro de abertura final do perfil de emergência selecionado. Rosa para Ø3,40, amarelo para Ø3,90 e azul para Ø4,40.



Componentes protéticos

Sistema BASIC




Pilar de alto desempenho para todas as reabilitações

Basic é um pilar transepitelial de alto desempenho face a cargas cuja emergência respeita o espaço biológico e que aumenta a exigência estética. Dispõe de um parafuso transoclusal de maior comprimento e métrica do que outros transepiteliais



Pilar Basic com aplicador

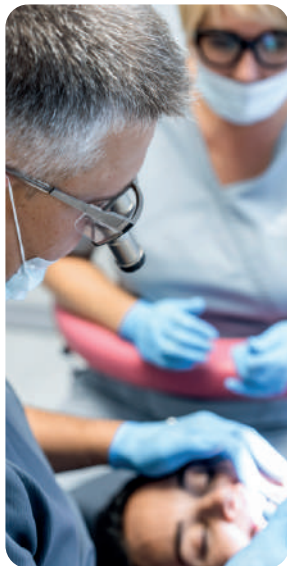

Adequado para todas as plataformas.



Para próteses unitárias ou simples.



Diferentes alturas gengivais.

Pontos fortes do pilar Basic

- Tolerância a angulações mínimas para facilitar os eixos de inserção protética.
- Resolve a **profundidade** dos implantes.
- **Iguala os desníveis** provocados por atrofia óssea em próteses múltiplas.
- Disponível para todos os tipos de conexão.

Caixas cirúrgicas



Disposição e precisão cirúrgica



Descubra todas as caixas cirúrgicas ou protéticas desenvolvidas pela **Ziacom®**

Exclusivas para cada sistema de implantes.

Ziacom[®] 3D

Cirurgia guidata




Intervenções previsíveis, seguras e eficientes

GALAXY 3D

Graças ao nosso sistema de simulação cirúrgica, o cirurgião pode prever e antecipar possíveis incidentes, garantindo assim uma intervenção segura, rápida e confortável para o paciente.


IMPORTANTE

Consulte o catálogo específico do sistema para obter mais informações e recomendações de utilização.

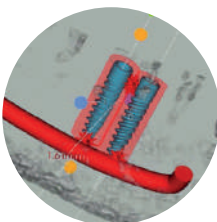

Descubra todos os sistemas disponíveis desenvolvidos pela **Ziacom®** e os próximos em que estamos a trabalhar para ampliar as soluções para os casos clínicos que possam surgir.

Kit de Expandores

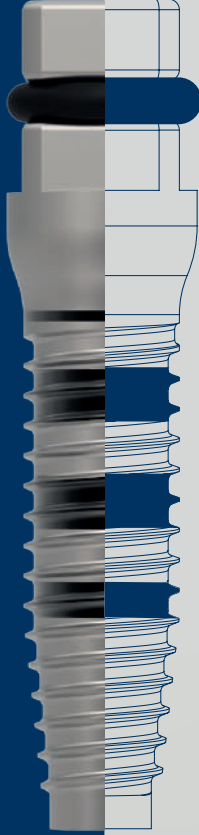

O uso do Kit de Expansores **Ziacom**®, está indicado para aumentar o volume e a qualidade óssea mediante a expansão das corticais ósseas ("split-crest") ou a compressão do osso medular de baixa densidade.

Características gerais dos expansores ósseos



A ponta do expansor tem 2 mm



Cabeça compatível com chave de torque 4x4 mm



Ponta atraumática



- Comprimento de parte ativa de 14,5 mm.
- Forma otimizada.
- Desenho roscado.
- Expansor com marcação laser.

A morfologia dos nossos expansores, a sua grande diversidade de tamanhos, as suas tipologias e o seu desenho diferenciador mediante marcação a laser fazem do Kit de Expansores Ziacom um dos melhores aliados do cirurgião.





IMPORTANTE

Consulte o catálogo específico deste implante para obter mais informação e recomendações de utilização.

Características específicas

A ponta do expansor ósseo N.º 1 tem uma forma cônica que facilita a inserção do mesmo.

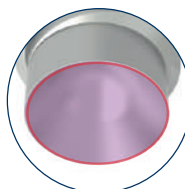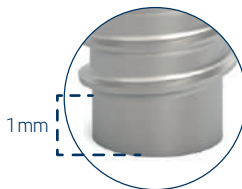

1 mm

O expansor ósseo sinusal N.º 7 da **Ziacom**® está desenhado para comprimir o tecido ósseo que rodeia a membrana sinusal, criando espaço suficiente para a colocação de implantes de maior comprimento.



Regenerativo

Pins de fixação



Pin de fixação **ZS1**

Os pins de fixação ZS1 Ziasure da Ziacom® foram desenvolvidos para serem utilizados em processos de regeneração óssea guiada (ROG). A sua principal função é a fixação de membranas, tanto reabsorvíveis como não reabsorvíveis.

Estão disponíveis dois comprimentos: 3,30 mm em anodizado amarelo e 5,50 mm em azul.



Parafuso curto de fixação óssea **ZS2**

Os parafusos de fixação ZS2 Ziasure da Ziacom® foram concebidos para serem utilizados em procedimentos de regeneração óssea guiada (ROG) como dispositivos de fixação e imobilização de enxertos ósseos ou de tecido mole, membranas reabsorvíveis e não reabsorvíveis.



Regenerativo

Biomateriais

oPurgo



(100% desmineralizado)

Uma matriz mineral óssea natural de origem porcina para reconstrução óssea. É produzida através da remoção de todos os componentes orgânicos do osso porcino. Devido à sua estrutura nativa, THE Graft™ assemelha-se aos aspectos físicos e químicos da matriz mineralizada do osso humano. Quando colocado num defeito ósseo, THE Graft™ é gradualmente reabsorvido e substituído por osso durante o processo de cicatrização. Está disponível em grânulos esponjosos embalados em frascos.

THE Graft™ é esterilizado por irradiação gama.



Formato Seringa

Regenerativo

Biomateriais

oPurgo



Substituto Ósseo Natural com colagénio




O bloco de Colagénio Graft™ é composto por matriz mineral óssea derivada de osso esponjoso e atelocolagénio de tendão porcino. O THE Graft™ Collagen é um enxerto ósseo destinado a preencher, aumentar e/ou reconstruir defeitos periodontais, orais e maxilofaciais. A matriz mineral óssea do THE Graft™ Collagen é semelhante aos aspectos físicos e químicos da matriz mineralizada do osso humano. Os componentes do colagénio hidratado têm uma viscosidade que facilita a mistura da matriz mineral óssea. Com esta caracterização, o colagénio THE Graft™ pode ser aparado e/ou moldado de acordo com as várias formas do defeito e pode ser fixado no local do defeito ósseo. Com o passar do tempo, o colagénio THE Graft™ é parcialmente transformado pelas células osteoclásticas e osteoblásticas.





**Material de enxerto ósseo natural
biocompatível e seguro.**

O colagénio Graft™ é apenas a ciência em si!

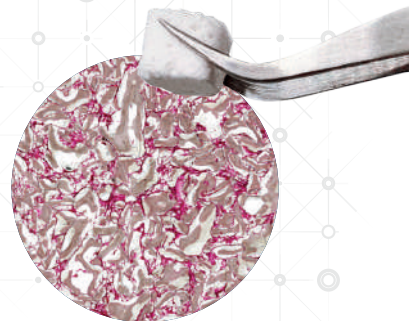

Regenerativo Biomateriais

°Purgo

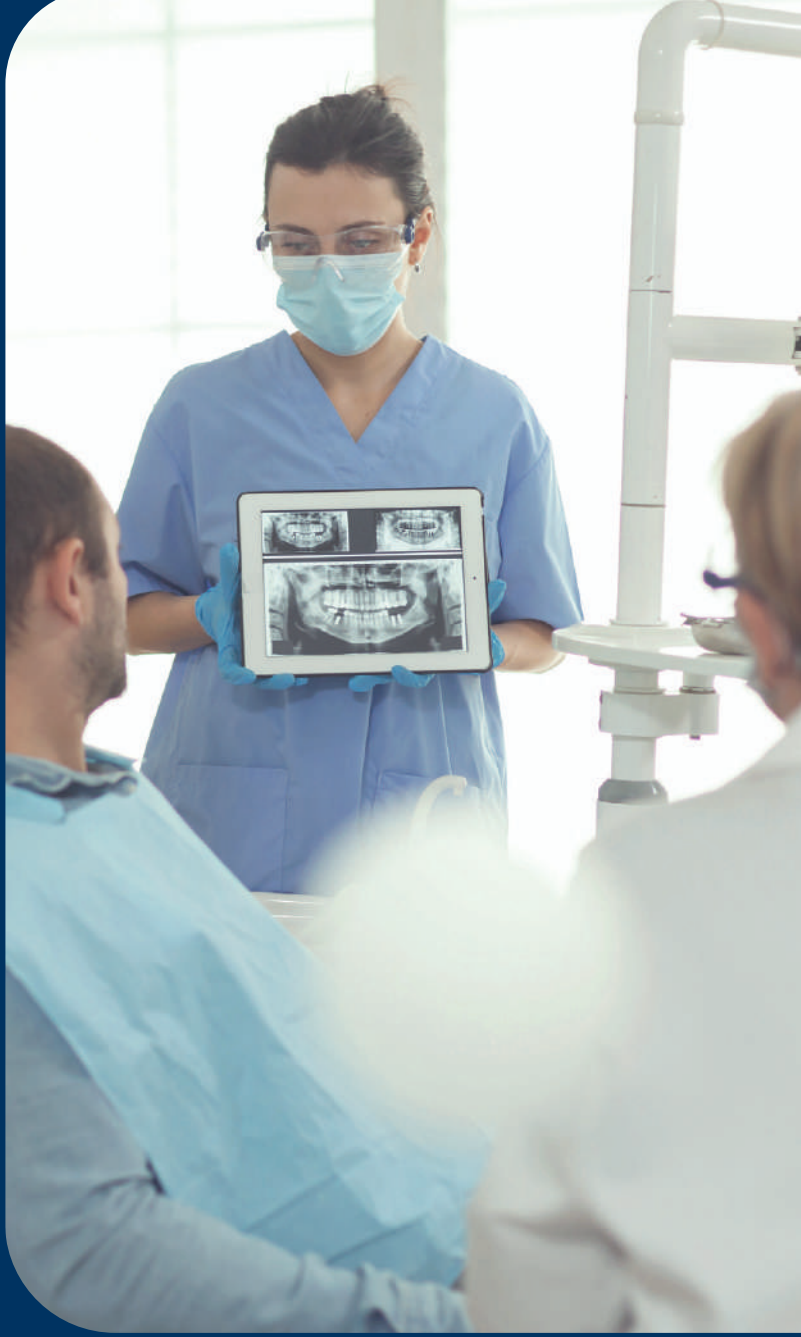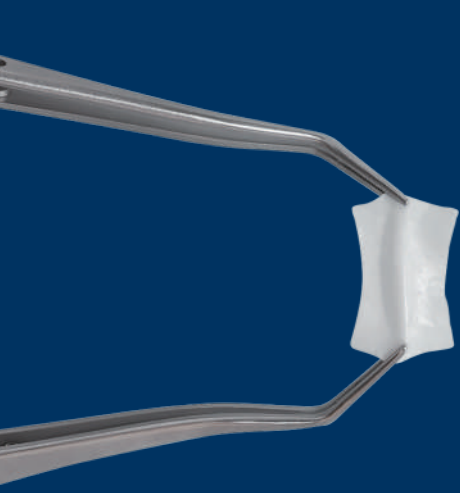

Membrana de colagénio absorvível adaptável

THE Cover™

THE Cover™ é uma membrana reabsorvível originada a partir de um colagénio tipo I puro, e é altamente biocompatível e amiga das células, uma vez que não foi utilizado um agente de reticulação química.



Existem dois tipos de THE Cover™; **THE Cover™ Flex** que oferece experiências de manuseamento fáceis e **THE Cover™ Stiff** mais favorável à manutenção do espaço.

Regenerativo

Biomateriais

oPurgo



Membrana de PTFE não reabsorvível

::OpenTex®

A membrana de PTFE não reabsorvível OpenTex® é uma folha de politetrafluoroetileno (PTFE) puro de qualidade médica com características biológicas inertes e um efeito de barreira previsível. Devido à superfície lisa e ao tamanho reduzido dos poros, a membrana de PTFE OpenTex® resiste à incorporação de bactérias na sua estrutura e facilita a remoção da membrana.



::OpenTex® -TR



A membrana é composta por uma folha de 100% politetrafluoroetileno (PTFE) e uma estrutura de titânio de grau 1, que são biologicamente inertes e compatíveis com os tecidos.

Regenerativo

Biomateriais

oPurgo



Sutura PTFE



A Sutura de PTFE Não Reabsorvível Biotex® é constituída por uma sutura monofilamentar não reabsorvível de braço único com uma agulha cirúrgica de aço inoxidável ligada à sutura. A sutura é não revestida, não tingida e estéril para utilização única, composta por 100% PTFE.



- MANUSEAMENTO SUAVE
- BIOLOGICAMENTE INERTE
- SEM EMARANHAMENTO
- FÁCIL DE APERTAR



Regenerativo


Outras membranas




Outras membranas

Membranas totalmente biocompatíveis e reabsorvíveis e são especialmente indicadas em técnicas de Regeneração Óssea Guiada (ROG) e Regeneração Tecidual Guiada (RTG).

T-Gen®

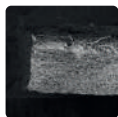

T-Gen® corte transversal SEM

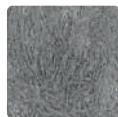

T-Gen® superfície SEM

Membrana de colagénio reabsorvível

Membrana de colagénio reabsorvível de origem suína. A sua utilização pode ser combinada com enxertos ósseos ou pode ser diretamente aplicada à área do defeito. A membrana T-Gen® é especificamente indicada nas seguintes situações clínicas:

- Regeneração do alvéolo pós-extração.
- Preservação do rebordo alveolar.
- Preparação do local do implante.
- Aumento do seio maxilar.
- Tratamento de defeitos de fenestração.
- Proteção da membrana do seio maxilar contra rasgões.

¿Porquê utilizar T-Gen®?

- ✓ Excelente manipulação
- ✓ Excelente estabilidade
- ✓ Melhor integração dos tecidos

SHELTER® [S]



Membrana reabsorvível de origem bovina

A membrana reabsorvível SHELTER® SLOW está disponível em três espessuras diferentes para oferecer uma solução para a grande maioria das situações clínicas: **0,2 mm, 0,4 mm e 0,8 mm**. Indicado para:

- Preservação alveolar.
- Regeneração horizontal e vertical.
- Elevação do seio maxilar.
- Aumento do rebordo à volta do implante.
- Tratamento periodontal.

¿Porquê utilizar SHELTER® SLOW?

- ✓ Fácil manuseamento devido à sua consistência precisa
- ✓ Elevada elasticidade
- ✓ Elevada resistência à tração.
- ✓ Evita a passagem direta de bactérias e células epiteliais.

Equipamento

Centrífuga



A centrífugadora DUO Quattro PRF é um sistema avançado que incorpora características inovadoras para criar coágulos de fibrina APRF e IPRF a partir do plasma. Este sistema é a mais recente e inovadora oferta do inventor do PRF, Dr. Joseph Choukroun. As suas descobertas conduziram a novos protocolos que optimizam a qualidade do PRF, tanto no estado líquido (I-PRF®, S-PRF®) como no estado sólido (A-PRF®).

O conceito de PRF (Fibrina Rica em Plaquetas) de Choukroun baseia-se na centrifugação de sangue total sem anticoagulantes. Após a centrifugação, formam-se coágulos de fibrina. Com o sistema DUO Quattro, é possível produzir membranas de fibrina.

Este sistema é ideal para várias aplicações no domínio dentário, tais como a regeneração óssea guiada, a regeneração tecidular guiada, a recessão gengival, a preservação alveolar e a estética facial.

DUO Quattro PRF é uma **ferramenta essencial para qualquer profissional de medicina dentária** que pretenda **melhorar e acelerar a regeneração óssea** e dos tecidos moles dos seus pacientes.



Regenerativo

Biomateriais




Sutura monofilamentar de rápida absorção

MONOGLYC™

Sutura à base de ácido poliglicólico e E-caprolactona copolimerizada em uma proporção específica. As agulhas são feitas de aço inoxidável especial e têm um revestimento preto para reduzir os reflexos da luz.



Técnica de sutura apical em colchão do Dr. Choukroun

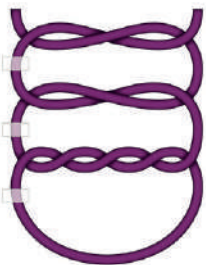

As estruturas de superfície monofilamentares lisas do polímero Monoglyc™ resultam em excelentes propriedades de manuseamento e de passagem dos tecidos. O traumatismo tecidular provocado pela sutura é praticamente inexistente com o Monoglyc™, e a estrutura monofilamentar evita a absorção de bactérias. A superfície lisa do Monoglyc™ proporciona excelentes propriedades de manuseamento, combinadas com a agulha afiada e de alta qualidade que permite uma passagem atraumática através do tecido.

O Monoglyc™ é absorvido numa média de 4 semanas e é a sutura ideal para a Técnica de Colchão Apical. Uma nova sutura e técnica de sutura que o ajudará a remover a tensão e a mobilidade do retalho bucal.

IMPORTANTE

A sutura deve ser cortada ao comprimento: mínimo 8 mm.

Caso contrário, os fios são prejudiciais. Quanto mais curtos forem os fios, mais endurecem.

Equipamento

Scanners



Medit i900 Classic



Precisão sem esforço

- › Unibody sem juntas
- › Controlo táctil
- › Banda táctil de 360º
- › Motor óptico de 3ª geração
- › Maior profundidade e exploração

Medit i900 Mobility



A liberdade de digitalizar sem limites

- › Campo de visão mais amplo
- › Bateria inteligente
- › Indicadores LED de estado
- › Wi-Fi 6E incorporado
- › Maior profundidade e exploração



Equipamento

Scanners



Medit T710



Digitalização
ultra rápida



Alta
precisão



Sistema
aberto



Câmaras de
alta resolução



Elevação
automática



› Suporte KAS

Sistema 3 em 1, que oferece versatilidade de utilização com articuladores KaVo, Artex ou SAM.



› Suporte AM

Para articuladores virtuais. O suporte AM é compatível com os articuladores MARK 330 e BIOART A7+, facilitando a integração e o desenho em Exocad.



Equipamento

Motores Cirúrgicos



Desempenho, equilíbrio e controle excepcionais

› **Precisão absoluta.**

Sistema eletrônico de alta precisão que evita calibrações adicionais; O pedal de controle único e os contra-ângulos ergonômicos facilitam o controle.

› **Confiança na cirurgia.**

As sequências operatórias estão pré-programadas, para que possa realizar as suas intervenções no mínimo de tempo e com total confiança de que obterá o resultado ideal.

› **Interface intuitiva.**

O botão de controle único e a simplicidade do ecrã facilitam a navegação. Num só relance, tem acesso a todas as informações necessárias para a intervenção.

› **Fácil limpeza.**

Todos os elementos se retiram com facilidade para a sua esterilização.

› **Com micromotor MX-i LED.**

Único no mercado, proporciona uma iluminação LED de igual intensidade, independentemente da velocidade de trabalho.



Equipamento

Motores Cirúrgicos



Operabilidade, segurança e conectividade sem fio incomparáveis

› Operacionalidade melhorada.

Mais conforto e menos fadiga graças ao facto de o centro de gravidade estar próximo da cabeça do contra-ângulo.

› Monitor sensível e seguro.

O visor é muito fácil de limpar, e o painel tátil foi desenhado para responder mesmo com luvas cirúrgicas.

› Luz LED colorida de alta resolução.

Maior visibilidade durante cada intervenção, gerando uma qualidade mínima de calor.

› Ligação e pedal de controlo sem fios.

O pedal de controlo sem fios melhora o alcance, é leve e pode ser personalizado ao gosto do profissional. Sistema compatível com a maioria dos dispositivos.

› Máxima precisão de torque.

O avançado sistema de calibração AHC da NSK oferece a máxima segurança na colocação de implantes.




RealAligner

Ortodontia Invisível




Mais do que apenas um produto

Oferecemos um serviço completo, fornecendo-lhe tudo o que precisa para tornar a ortodontia invisível uma nova especialidade no seu consultório dentário.

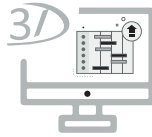

SOFTWARE
PERSONALIZADO

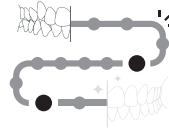

FLUXO DIGITAL PARA
O PLANEAMENTO



FORMAÇÃO CONTÍNUA
EM ORTODONTIA



ZIADERMA

Ácido Hialurónico



#AddictiveSkin

Os fillers Ziaderma foram desenvolvidos para administração intradérmica, promovendo uma melhoria imediata e visível das imperfeições cutâneas.

Ao longo do tempo, contribuem para a reestruturação, revitalização e hidratação profunda da derme, favorecendo o rejuvenescimento e a regeneração cutânea.

SOFT

MEDIUM

DEEP




ZiacomGroup





ZiacomGroup

20 anos de excelência em
inovação e tecnologia na
medicina dentária.

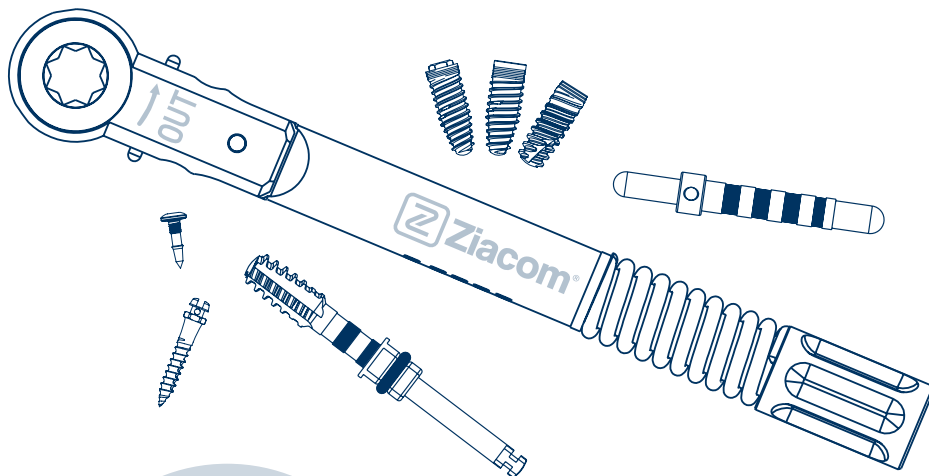

ziacomlusobionic.com



Consulte as condições gerais de venda atualizadas no nosso website www.ziacom.com

Consulte a disponibilidade de cada produto por país.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta documentação pode ser reproduzida, armazenada em qualquer suporte ou sistema de reprodução, ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio, eletronicamente, mecanicamente, em fotocópia, gravação ou de qualquer outra forma não contemplada aqui sem a permissão do proprietário dos direitos da marca, edição e impressão. Ziacom® é uma marca registrada da Ziacom Medical Group SL.

Consulte a última versão disponível dos catálogos em www.ziacom.com.

Together
for **patient's**
well-being
around the world



PT | PORTUGUÊS
Rev-07

